

判读手册

HANDY PLATE®


金黄色葡萄球菌测试片

Staphylococcus Aureus Detection Plate

本手册用于指导金黄色葡萄球菌测试片结果的判断和解释，未尽事宜可与技术支持联系。

金黄色葡萄球菌测试片为常温常压条件下制备的无菌的一次性产品，含有符合国家标准的培养基、耐液化的凝胶剂和显色指示剂。


按标准要求或说明书推荐培养条件培养后，肉眼或借助放大镜等计数所有紫色菌落。菌落数在 30-150CFU 之间较为适宜。紫红菌落或者品红色菌落为可疑金黄色葡萄球菌，其它蓝绿色或无色菌落为杂菌。如需进一步确认，在测试片上贴上确认片或者挑取可疑菌落进行耐热 DNA 酶或血浆凝固酶等生化确证。

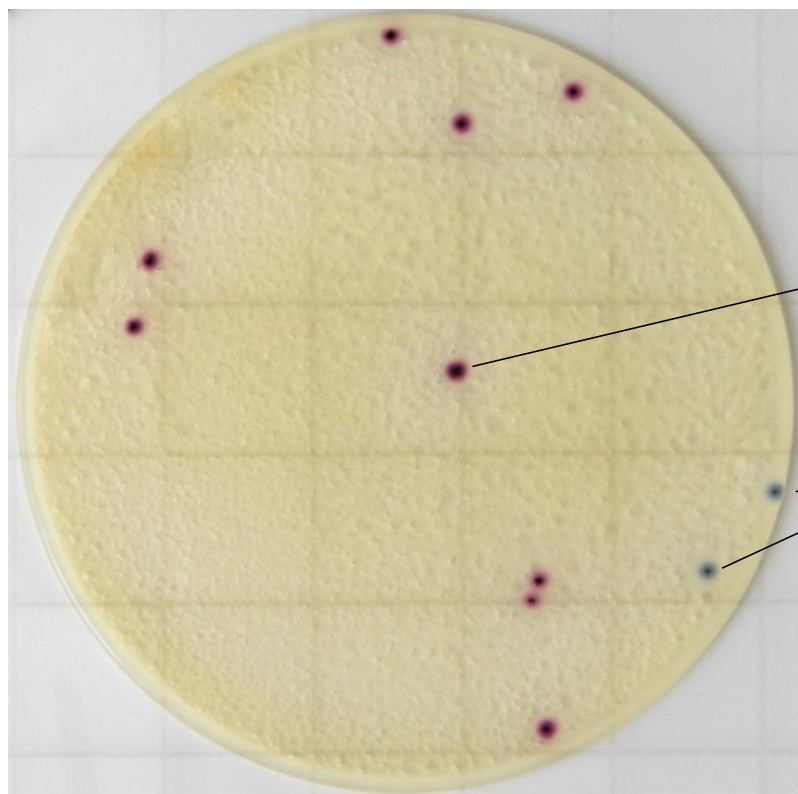

可疑金黄色葡萄球菌

其它杂菌

菌落数=0

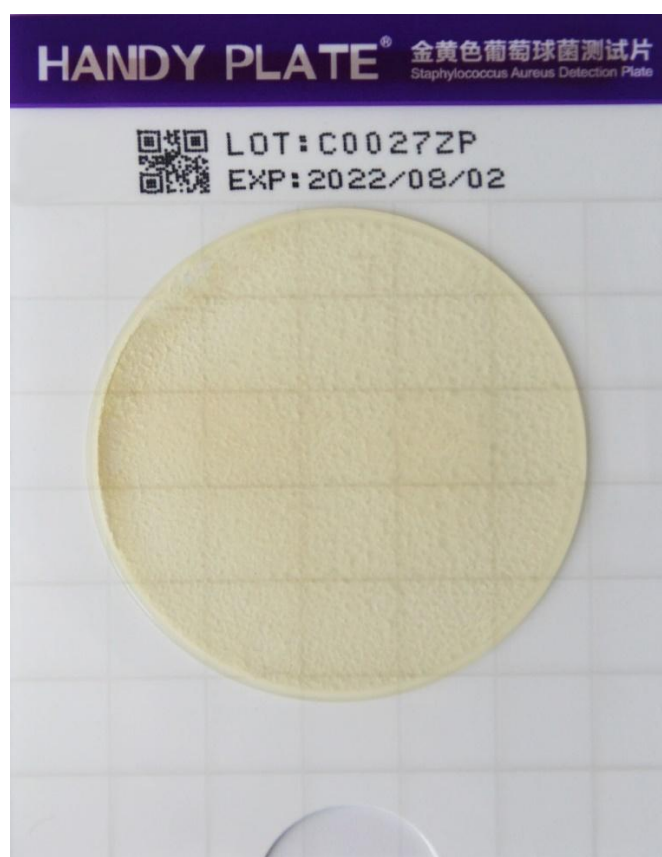

菌落数=16



菌落数=48



菌落数=401



菌落数=多不可计

